

SnapIT

Multi-Use | Ampoule Opener

施耐柏安瓿安全開瓶器

~ 產品使用說明 ~

LITE Edition

SnapIT Lite comes in regular and large. The lightweight plastic components means you can add this to your lanyard with other items and not be weighed down.

- made from sturdy, low cost plastic.
- hexagonal anti-roll collar.
- great promotional item or gift.
- regular 1ml to 15ml ampoules, that's 70% of all ampoules used.
- large opens 5ml to 25ml ampoules.

HEXAGONAL COLLAR HELPS STOP ROLLING.





DON'T LET THIS HAPPEN TO YOU



THERE IS A SAFER WAY

Instructions for Use

INSERT

ALIGN DOTS:




DOTS

SNAP IT

AWAY FROM DOT:

LID STAYS SAFELY INSIDE

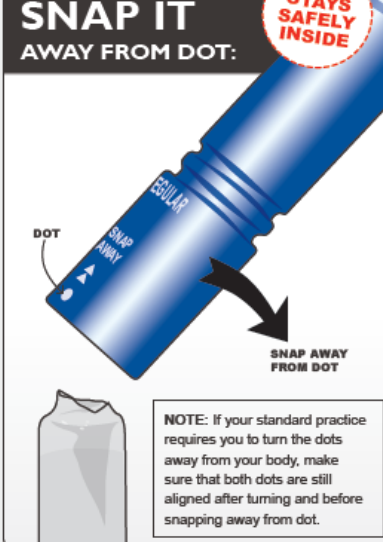


DOT

SNAP AWAY FROM DOT

NOTE: If your standard practice requires you to turn the dots away from your body, make sure that both dots are still aligned after turning and before snapping away from dot.

EJECT

LID IN BIN:

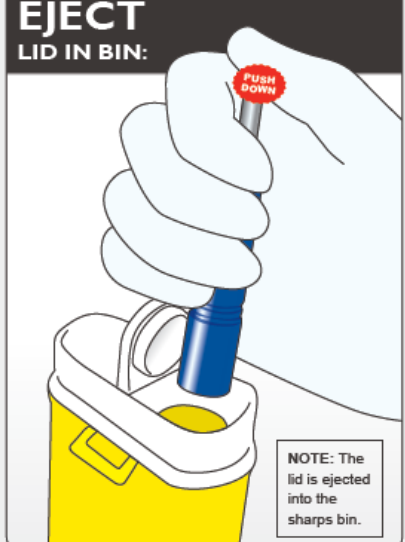

PUSH DOWN

NOTE: The lid is ejected into the sharps bin.

1. 安瓿上若有標示點則務必對準SnapIT上的標示點，輕緩地將安瓿上部套入SnapIT，使其固定於頸部的位罝。
2. 將標示點朝外(不要面向自己)，與標示點反方向輕輕施力折斷安瓿的上部且其會保留在SnapIT內。
3. 以大拇指按壓SnapIT上方的樞紐中軸，將安瓿上部壓出棄置於尖銳物收集桶內。

4. 定期清潔: 請依圖示取出O型環，再以清水或醫院用等級清潔劑清洗之。請在清潔盤或容器內進行此步驟以避免零件不見。待完全乾燥後重新組裝即可再使用。

Notes:

如欲將SnapIT全部拆解清洗，請先將SnapIT上方套環拆下，O型環及中軸取出，在按照上方步驟4完成清潔動作。
O型環為可替換零件，若有需要購買請洽客服。

CLEANING

YOUR SNAPIT:



SnapIT

Multi-Use | Ampoule Opener

施耐柏安瓿安全開瓶器

~LITE 輕量系列~

SnapIT 保護您的雙手, 更簡單、安全、快速的開啟安瓿, 避免因徒手開啟造成尖銳物刺傷, 降低工作職業傷害。可重覆使用, CP值高。(更多產品訊息請洽企業網站:
www.medgreen.com.tw)



專業護理人員、藥師專用

產品規格

產品系列: SnapIT Lite (輕量系列) 適合個人隨身攜帶使用

產品型號: SN-02R · SN-02L

產品材質: 本體ABS 塑鋼; O型環 Silicon rubber (O型環可替換)

產品尺寸: Regular; Large

顏色: 鐵灰色

如何挑選適合的SnapIT:

1. 請挑選能套入且固定卡住安瓿的 SnapIT 規格。(Regular 或 Large)
2. SnapIT選擇決定於安瓿瓶頸的大小, ml量僅為參考

Sizes

- If the ampoule lid is too big, it will not fit through the entrance. Use a larger Snapit.
- If the ampoule is too small, the Snapit will not hold the top securely. Use a smaller Snapit.

Ampoule Size	Snapit Size	Ampoule Size	Snapit Size
1 - 2 ml	REGULAR Most Common Sizes	Large 5 - 10 ml	LARGE
5 - 10 ml			
10 - 15 ml			
		10 - 15 ml	
		20 - 25 ml	

Snapit size is determined by Ampoule lid. Content in mls can be used as a guide.

Due to the inconsistent variation of tops, this is only a guideline.

注意事項:

1. LITE輕量系列不適用高溫高壓消毒, 如有高溫高壓消毒需求, 請洽客服詢問 Personal 與 Trolley 系列 鋁合金材質。
2. Regular + Large 合用可開啟各種尺寸的安瓿瓶。(只有極少數的安瓿瓶頭為圓形或過小無法卡入開瓶器中。)

製造廠商: Qlicksmart Pty Ltd. PO Box 5677, West End, Brisbane, QLD 4101, Australia

總代理: 美綠國際股份有限公司

客服電話: 02-26096607

客服信箱: service@medgreen.com.tw